

送風定温乾燥器

SFD55

設置面積はW380×D440mmと省スペース、すっきりとしたスリム型

使用温度範囲 (室温+10) ~210℃

庫内容量 約55L



シンプルな操作画面

定値、オートストップ、オートスタート運転の他、定値運転中、一定時間後に停止したい場合にキー操作で簡単設定できる“クイックオートストップ運転”も可能




過昇防止器(右側面下)

操作部の温度調節器と別に液体膨張式(サーモスタット)による独立した過昇防止器を装備

側面から見た循環図

鋼板製の送風ファンにより庫内を対流させます

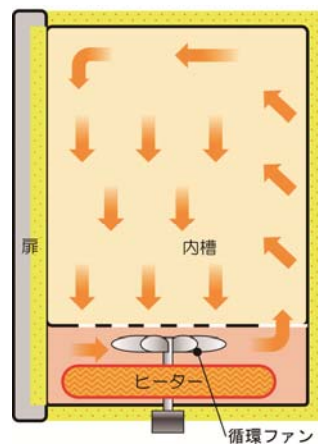

送料実費

| 商品コード | 区分 | 型式 | 価格(円) |
|---------|----|-------|---------|
| 46-1601 | 5● | SFD55 | 193,000 |

※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

特長

Forced Convection Oven

- ◆送風循環により庫内がムラなく攪拌され、均一な温度分布。
- ◆定値運転の他、オートスタート・オートストップ・クイックオートストップのタイマー機能付。
- ◆扉は右開き、左開きどちらにも変更可能(出荷時は左開き)。設置する場所に応じて簡単に取付けできます。
- ◆漏電ブレーカー、センサ入力警報、自動温度過昇防止、独立過昇防止器を装備。安全対策は万全です。
- ◆キャリブレーションオフセット、停電補償、設定値ロック機能も搭載しています。
- ◆転倒防止金具を標準装備。地震や衝撃等による転倒の安全対策として固定して下さい。


仕様

| | |
|----------|---------------------------------|
| 使用温度範囲 | (室温+10)~210℃ |
| 温度調節精度 | ±1℃(at210℃) |
| 温度分布精度 | ±4℃(at210℃) |
| 最高温度到達時間 | 約60分(室温→210℃) |
| ヒータ | 鉄-クロムワイヤーヒータ 800W |
| タイマー | 0~999.9時間 |
| 内槽/外装材質 | ステンレス鋼板/クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 |
| 排気口 | ステンレス φ30mm(ダンパー付) 上面1ヶ所 |
| 棚段数・ピッチ | 9段・50mm |
| 棚板耐荷重 | 約3kg/枚 |
| 内寸法・容量 | W300×D350×H530mm・約55L |
| 外寸法・重量 | W380×D440×H875mm(突起部除く)・約35kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 8.5A(ブレーカー容量15A) |
| 付属品 | 棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式 |

※性能は室温23℃±5℃、湿度65%rh±20%、無負荷時の値。

※試料は分散させて設置して下さい。載せ過ぎ、入れ過ぎにご注意下さい。また、庫内背面のファン吹き出し付近に試料を置くと、温度精度の低下や試料自体への風の影響を与える場合がございます。

※棚板1枚は最下段にねじ止めされています。ヒータ及びファンにより高温となりますので試料の直置きはしないで下さい。

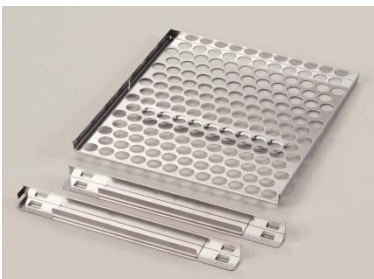

オプション(棚板)

| 商品コード | 区分 | 型式 | 価格(円) |
|---------|----|--------|-------|
| 46-1602 | 7● | 211190 | 7,200 |

セット内容: 棚板1枚、棚受2本 材質: ステンレス

※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...